



SIEMENS

micon
Nouvelle
technologie

www.siemens.fr/audiologie

Aquaris micon de Siemens.

Informations pour l'audioprothésiste.



Life sounds brilliant*.

* La vie sonne brillamment.

Étanche, robuste et encore plus puissant.

Jardiner, nager, courir ou faire de la randonnée, Aquaris™ de Siemens permet de tout faire. En effet, Aquaris est étanche, c'est la première aide auditive conforme à la norme officielle IP68. La transpiration, la poussière, le sable ne sont plus une menace pour Aquaris, robuste et ultra fiable, parfait pour profiter de la vie sans aucune limite.


De plus, équipé de micon™, la dernière génération BestSound™ Technology et avec 74 dB de gain (au simulateur d'oreille), Aquaris est encore plus puissant !

Aquaris micon™



miCON. La nouvelle dimension.

Aquaris micon en un coup d'œil.

- Équipé de micon - la nouvelle plateforme BestSound Technology
- Pile 13
- Étanche - Norme IP68
Résistant à la poussière et aux chocs
- Boîtier ultra robuste
- SecureFit
- Traitement de surface type gomme
- Générateur de bruit (anti-acouphènes)
- e2e wireless™ 2.0
- Bobine téléphonique  via miniTek
- Marche/arrêt au tiroir pile
- Bande passante élargie à 12 kHz (7mi)
- Boîtier interchangeable pour changement de couleurs
- Trois niveaux de performance :

7mi

5mi

3mi




Nouveau !

- IP68 :
 - IPX8 - Protection contre les liquides, et en cas d'immersion complète et prolongée sous 1 mètre d'eau pendant 30 minutes.
 - IP6X - Protection contre le contact et la pénétration de corps étrangers (type poussière) pour une sécurité maximum et une qualité certifiée.
- Nouveau dôme tulipe (semi-ouvert) facile à nettoyer pour un plus grand confort.



Dômes tulipe

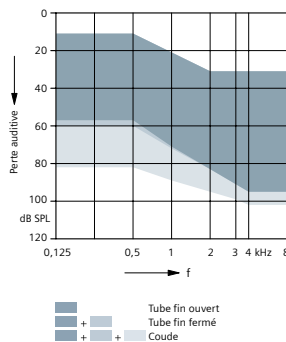

Valeurs : • Tube fin : 58/125 dB
• Coude : 74/136 dB

Encore plus puissant !

L'étanchéité Aquaris, ultra résistant.



Membrane microphonique étanche

Elle protège les microphones de l'humidité et laisse passer le son pour une qualité sonore parfaite.

Protection écouteur nanocoaté

Une grille de nanoprotection dans le pas-de-vis stoppe l'eau.

Boîtier monobloc

Fabriquée en une seule pièce et reliée au tiroir pile par un joint silicone, il peut être facilement remplacé en laboratoire.

Cache-membrane microphonique

Protège la membrane microphonique et réduit les bruits tels que le vent ou le bruissement des cheveux.

Nouveau ! Tiroir pile

Ergots renforcés et membrane reculée, l'aide auditive est parfaitement protégée à l'ouverture du tiroir pile.

Nouveau ! Membrane étanche pour les échanges d'air

La nouvelle membrane, plus large, empêche l'eau de s'introduire tout en laissant la pile respirer.

Nouveau ! Dôme tulipe

Pour des adaptations sans effet d'autophonation, convenant à un maximum de conduits auditifs.

Traitement de surface type gomme

Pour un maintien optimal de l'aide auditive sur l'oreille, ce qui l'empêche de glisser.



Membrane GORE® Acoustic vents pour la protection des microphones. *GORE, marques, images et symboles sont des marques déposées de W.L. Gore & Associés.



Accessoires.

Aquaris est compatible avec les télécommandes Tek™ et miniTek™ qui permettent une connexion sans fil aux appareils audio tels que le téléphone portable, le lecteur MP3, ...

Le Sport Clip, facile à fixer, garantit un maintien sûr d'Aquaris dans toutes les situations.

Aquapac est l'étui idéal où ranger les appareils électroniques (télécommandes, MP3) car il garantit une protection optimale contre l'eau.

Le microphone VoiceLink™ se connecte à miniTek et permet à l'utilisateur de suivre des conférences.

VoiceLink peut également être fixé sur la chemise de l'orateur pour une transmission optimale de la parole.



Couleurs Aquaris micon



Sable
(51)

Reflet argent
(6)

Gris rocher
(54)

Gris galet
(55)

Aqua
(56)

Questions/réponses de vos patients.

Pour plus d'informations, contactez notre hotline produits.

Question	Réponse Aquaris
Je suis très actif, j'adore faire du vélo. Aquaris tiendra-t-il le coup ?	Oui, profitez de la vie sans limite. Les propriétés waterproof* d'Aquaris le protègent de la transpiration. De plus, son traitement de surface type gomme l'empêche de glisser, et le Sport Clip le maintient en toute sécurité.
Puis-je garder Aquaris sous la douche ?	Oui, la douche n'est pas un problème pour Aquaris. L'eau n'endommagera pas Aquaris. Veillez cependant à ne pas laisser l'eau entrer dans votre conduit auditif. Évitez de mettre du shampoing sur Aquaris, ses performances pourraient s'en trouver altérées. Tamponnez délicatement le cache-membrane microphonique pour évacuer les gouttes d'eau de la membrane microphonique.
Puis-je nager ou faire de l'aquagym avec Aquaris et entendre mon maître nageur ?	Oui, nous vous recommandons d'utiliser un embout étanche pour nager. Activez le programme Aqua par l'intermédiaire de votre télécommande. Ce programme optimisera la qualité du son pendant que vous nagez.
J'aime plonger. Avec Aquaris, puis-je entendre sous l'eau ?	Non. Le monde sous-marin est très bruyant et il rend difficile l'écoute de sons spécifiques, même sans aide auditive. Aquaris n'amplifiera pas le son sous l'eau. Il résiste jusqu'à un mètre de profondeur. Souvenez-vous qu'il ne faut pas plonger à plus d'un mètre et pendant plus de 30 minutes. Retirez vos aides auditives avant de plonger ou de pratiquer des activités aquatiques durant lesquelles vos aides auditives resteraient immergées.
Je travaille dans un environnement poussiéreux et sale. Puis-je utiliser Aquaris ?	Oui, Aquaris ne craint ni la transpiration, ni l'eau, ni la poussière. Nettoyez votre Aquaris avec un tissu doux et tamponnez délicatement le cache-membrane microphonique pour retirer la poussière.
Aquaris est-il réservé aux personnes très actives ?	Non. Aquaris est fait pour toute personne désireuse de profiter de la vie sans limite. Il existe de nombreuses situations où l'utilisation d'une aide auditive robuste est nécessaire. La transpiration et la poussière quand vous faites du jardinage, la vapeur d'eau quand vous cuisinez, ou le sable et l'eau quand vous jouez avec vos petits-enfants sur la plage, sont autant de situations où Aquaris est la solution idéale.

* Étanche

L'étanchéité Aquaris en 5 points



Boîtier monobloc
Fabriqué en une seule pièce, sans vis, ni ouverture.



Membrane waterproof* pour les échanges d'air
La nouvelle membrane, plus large, empêche l'eau de s'introduire tout en laissant la pile respirer. Elle permet à Aquaris de fonctionner correctement avec des piles zinc-air standards.



Tiroir pile scellé
Joint silicone et forte pression de contact pour éviter tout effet de capillarité. Le nouveau tiroir pile empêche tout contact direct avec la membrane lors de l'ouverture de ce dernier.



Cache-membrane microphonique
Protège la membrane microphonique et réduit les bruits tels que le vent ou le bruissement des cheveux.



Protection écouteur
Protection écouteur nanocoatée. Une grille de nanoprotection dans le pas-de-vis stoppe l'eau.

Nous recommandons de faire réviser votre aide auditive Aquaris une fois par an afin de vérifier son étanchéité.



micon. La nouvelle dimension.

micon est la nouvelle plateforme de BestSound Technology, conçue pour offrir l'équilibre optimal entre qualité sonore et audibilité. Résultat : une acceptation spontanée, une satisfaction à long terme et un son naturel qui répondent aux attentes des patients. micon, la nouvelle dimension.

miSound™

miSound assure une qualité sonore si exceptionnelle que le malentendant en oublie qu'il porte des aides auditives. Grâce à la nouvelle formule de préréglage micon-Fit, dotée d'une rapidité de traitement et d'un nouvel anti-Larsen avancé, micon délivre un son brillant et naturel.

miFocus™

Le système TwinMic™ sur 48 canaux, système microphonique intelligent de micon, permet de réduire les efforts d'écoute. Les microphones directionnels et les filtres numériques, qui suppriment tous types de bruit, apportent une meilleure intelligibilité de la parole, même en environnement sonore complexe.

miGuide™

miGuide détecte les situations acoustiques puis adapte en douceur la courbe de réponse et les réglages convenant à l'utilisateur. Il est également équipé d'un algorithme d'apprentissage qui mémorise les préférences sonores et ajuste l'appareillage aux situations spécifiques, et ce de façon progressive. Ces réglages peuvent être paramétrés individuellement sous Connexx™ 7.

BestSound Technology :
l'équilibre optimal pour une expérience auditive personnalisée.



La nouvelle dimension avec Aquaris micon,
maintenant encore plus puissant.

Nouveau!

micon
La nouvelle dimension.



Aquaris micon

Taille réelle

Les marques, images et symboles Bluetooth® sont la propriété exclusive de Bluetooth SIG, Inc. utilisés par Siemens AG sous permission.

Les autres marques et symboles appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les informations de ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne sont pas toujours présentes dans tous les cas individuels et peuvent être modifiées sans préavis.

Les dispositifs requis seront adaptés par l'audioprothésiste pour chaque cas individuel de chaque malentendant pendant les réglages individualisés et au moment de la délivrance des produits.

Dispositif médical de classe IIa. TUV SUD, CE 0123. Ce dispositif médical est remboursé par les organismes d'assurance maladie. Classe D : Code générique (Base de remboursement) – de 20 ans : 2355084 (1400 €) et + de 20 ans : 2335791 (199,71 €). Pour un bon usage, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Germany

Global Business Unit

Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
DE-91058 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 308-0

Siemens Audiologie France

B.P. 40
93201 Saint-Denis cedex
France
www.siemens.fr/audiologie

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Germany
Phone: +49 9131 84-0
www.siemens.com/healthcare

Legal Manufacturer

Siemens Audiologische Technik GmbH
Gebbertstrasse 125
DE-91058 Erlangen
Germany